



EFFETTI :

- Epilazione
- Rosacea
- Couperose
- Acne
- Macchie cutanee
- Capillari
- Fotoringiovanimento

Elettra light

Luce pulsata: Leggera, Compatta, Estremamente versatile Raffreddata ad acqua.

www.biomedgroup.it



Elettra Light

Made in Italy



Bio Med Group offre una vasta gamma di dispositivi e tecnologie di ultima generazione, abbinati a servizi Marketing in grado di potenziare le vendite dei clienti affiliati. **Elettra Light** è un sistema IPL di ultima generazione, indicato per il trattamento di inestetismi e problemi legati agli strati più superficiali della pelle.

INFORMAZIONI GENERALI

La nuova **luce pulsata ad alta intensità** permette di trattare più efficacemente e in modo meno invasivo una vasta gamma di lesioni benigne: dalla couperose alla rosacea, dai pori dilatati alle macchie senili, dai tatuaggi ai peli superflui. Le sue caratteristiche lo rendono uno strumento unico, tecnologicamente evoluto ed altamente affidabile nel settore estetico e medico, è dotato di sistemi di controllo software e di protezione hardware che consentono trattamenti affidabili e ripetitivi limitando i rischi di danno termico.

Il trattamento a luce pulsata Elettra Light agisce sui capillari che nutrono i bulbi piliferi, permettendo di trattare anche i peli chiari e bianchi, con ottimi risultati visibili già dopo le prime sedute. Inoltre l'energia luminosa è in grado di incrementare il turn over cellulare, stimolando la produzione di nuovo collagene, che rivitalizza la tessitura e la consistenza della pelle, ricompattando i pori dilatati ed eliminando le discromie cutanee da cromoaging o da fotoaging.




Sei Filtri Intercambiabili



Esempio di Trattamento


INFORMAZIONI TRATTAMENTO

Il sistema di rilascio dell'energia consiste in un manipolo al cui interno è compresa la lampada, il cristallo / filtro, il sistema di raffreddamento il circuito di controllo e comando.

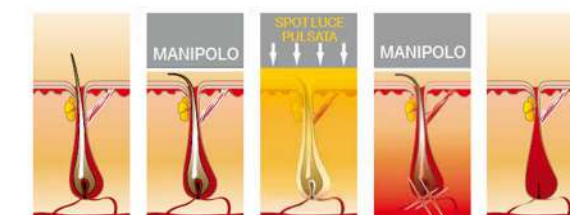

normale struttura pellica
posizionamento del manipolo sul pelo
la luce viene assorbita dalla melanina del pelo producendo un effetto foto-termico
innalzamento della temperatura del follicolo
la melanina si coagula creando la totale caduta del pelo

Funzionamento Luce Pulsata

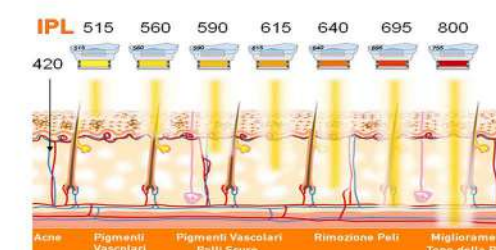

Intensità per tipologie di trattamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Elettra Light
Alimentazione:	220 V / 50 Hz
Assorbimento Max	800 VA
Apparecchio Tipo	II BF
Protezione Esterni	Fusibili di protezione
Display grafico	7"
Processori	2 in sistema
Peso Max	25 Kg
Dimensioni Max	42 x 31 x 45 cm
Energia	34 J/cm ² (+/- 2%)
Durata impulso	da 10 a 30 msec
Raffreddamento	liquido + gruppo a semiconduttore
Funzionamento	singolo impulso
Filtri disponibili:	400, 520, 550, 570, 600, 640 nm.



MEDICAL DEVICES