



MEDICAL

Ringiovanimento viso:

- Effetto lifting
- V-line forming
- Rughe del collo
- Sollevamento sopracciglio

Modellamento corpo:

- Iperidrosi ascellare
- Addome
- Gambe inferiori

Hifu Evo 2.0

Lifting non chirurgico del viso e rimodellamento del corpo.

www.biomedgroup.it



Innovativa tecnologia non invasiva, in grado di agire a profondità in precedenza raggiungibili solo con la chirurgia.

HIFU EVOLUTION 2.0

HIFU EVO è l'acronimo di High Intensity Focused Ultrasound (Ultrasuoni Evoluti e Focalizzati ad Alta Intensità) e si riferisce ad un'innovativa e molto precisa tecnica di terapia con la quale possono essere zone del viso e di tutto il corpo senza incisione chirurgica né inserimento di aghi.

Questo nuovo macchinario permette la penetrazione degli Ultrasuoni Focalizzati nella zona da trattare esclusivamente alla distanza focale scelta.

EFFETTO TERMICO SELETTIVO

L'onda ultrasuonica è emessa precisamente nel punto di fuoco dove raggiunge una temperatura superiore ai 65 gradi, necessaria per favorire la contrazione delle fibre di collagene. La procedura con Hifu Evo 2.0 può essere personalizzata secondo le necessità di ogni paziente attraverso il settaggio dell'energia e della profondità d'azione degli ultrasuoni emessi. I trasduttori per la zona viso emettono frequenza di 4 Mhz con una profondità focale di 4,5mm e 7Mhz ad una profondità focale di 1,5 e 3,0 mm.

Il trasduttore corpo emette impulsi a profondità maggiori inducendo la distruzione delle cellule adipose per un ottimo rimodellamento corporeo.

Il nuovo sistema elimina l'effetto calore in superficie, riducendo il calore sviluppato dal trasduttore, aumentando la sicurezza della procedura.

HIFU Evo agisce nel derma profondo con conseguente contrazione dello SMAS (Sistema Muscolare aponeurotico superficiale).




Esempio di Trattamento

INDICAZIONI AL TRATTAMENTO

- Rassodamento e ringiovanimento cutaneo,
- Pelle anelastica del collo e décolleté,
- Riduzione di rughe periorculari, mascellari e nasolabiali,
- Trattamento degli accumuli di grasso localizzati



La tecnologia che fa la differenza

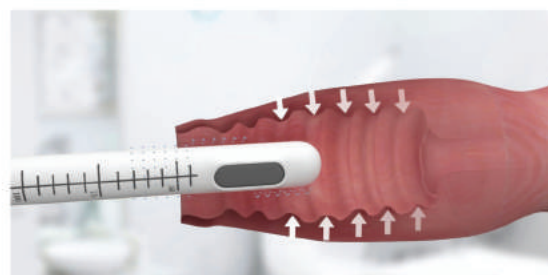

Possibilità aggiunta manipolo vaginale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	HIFU Evo 2.0
Alimentazione	110 V / 240 V
Frequenza di lavoro	4 Mhz
Potenza massima	100 VA
Fusibile	6 A
Peso netto	10 Kg

Cartucce in dotazione

3 mm / 4,5 mm

Cartucce disponibili

8 / 10 / 13 / 16 mm



MEDICAL DEVICES



* Il carrello non è compreso nel costo dell'apparecchiatura