

3M



- Completamente indolore
- Funziona su ogni fototipo
- Adatto alla pelle abbronzata
- Maggiori prestazioni



TAUROS EVO

Una svolta nell'epilazione laser, combina tre lunghezze d'onda per risultati senza pari

bio-med.tech



Epilazione più rapida, efficiente e conveniente

TAUROS EVO

Taurus Evo rappresenta una tecnologia rivoluzionaria per l'epilazione, combina la massima funzionalità con un comfort senza pari: una svolta nell'epilazione laser che unisce tecnologie sinergiche a risultati superiori. Questa apparecchiatura combina le **tre lunghezze d'onda** laser più efficaci al mondo in un unico applicatore, mirando contemporaneamente a diverse profondità dei tessuti e strutture anatomiche all'interno del follicolo pilifero. La combinazione di livelli di assorbimento e penetrazione di diverse lunghezze d'onda, insieme a una copertura estesa del trattamento, un maggiore comfort e bassi requisiti di manutenzione, rendono Taurus Evo il trattamento di epilazione più sicuro ed efficiente oggi disponibile.

COME FUNZIONA

L'innovativo manipolo di questa tecnologia è una risorsa preziosa per chiunque. Con una superficie di 4 cm², una performance del 40% più veloce e l'integrazione di tre lunghezze d'onda, 755 - 808 - 1064, riduce significativamente i tempi di trattamento e rende il processo più facile e più sicuro per i pazienti.

1064 nm > Il basso assorbimento della melanina, e la penetrazione più profonda del follicolo pilifero, consentono al diodo 1064nm di trattare le pelli più scure e di raggiungere, insieme al bulbo, anche il follicolo in modo sicuro ed efficace.

808 nm > Il moderato assorbimento della melanina consentono al laser a diodo 808nm una penetrazione profonda che raggiunge direttamente il bulbo del pelo e lo rende ideale per il trattamento di tutti i tipi di pelle, anche le più scure.


755 nm > Grazie ad un maggiore assorbimento della melanina, la lunghezza d'onda a 755nm colpisce tutti i tipi di peli, specialmente quelli chiari e sottili. L'obiettivo di quest'ultima è l'area di "bulge" del follicolo pilifero, ovvero la più superficiale.

INDICAZIONI AL TRATTAMENTO

Taurus Evo è in grado di lavorare contemporaneamente a diverse profondità dei tessuti e strutture anatomiche all'interno del follicolo pilifero, aumentando l'efficienza del trattamento. L'assorbimento combinato con raffreddamento continuo, il comfort e la bassa manutenzione, consentono il trattamento di una vasta gamma di tipologie e colori di pelo, (anche quelli chiari e particolarmente sottili).



THE POWER OF THREE
NEW - TRE TECNOLOGIE COMBinate PER LA
RIMOZIONE LASER DEI PELI
IN UN SOLO MANIPOLO

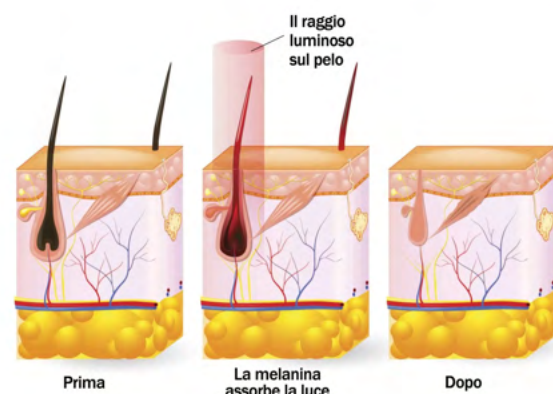

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TAUROS EVO
Energia	10-150 J/cm ² (regolabile)
Frequenza	1-10Hz (regolabile)
Lunghezza d'onda	755 - 808 - 1064nm
Impulso	40-800 ms (regolabile)
Potenze manipolo	1000w - 1200w
Alimentazione	AC 220V/110V, 50/60Hz



ENG

CE